

特殊クランプ




G-1 G-2
広いウイングで舌と頬を圧排します。ウイングの下にガーゼを敷いて簡易防湿に使用します。ラバーを掛ける必要がありません。2個組にて販売。

P-1 P-2
小児の下顎D用左右のクランプです。2個組にて販売。



12A 13A
特に第三大臼歯に適合する左右です。把持部に滑り止めのギザがついています。

138 139
スプリングは強力です。左右の智歯用クランプでピークに滑り止めのギザがついています。

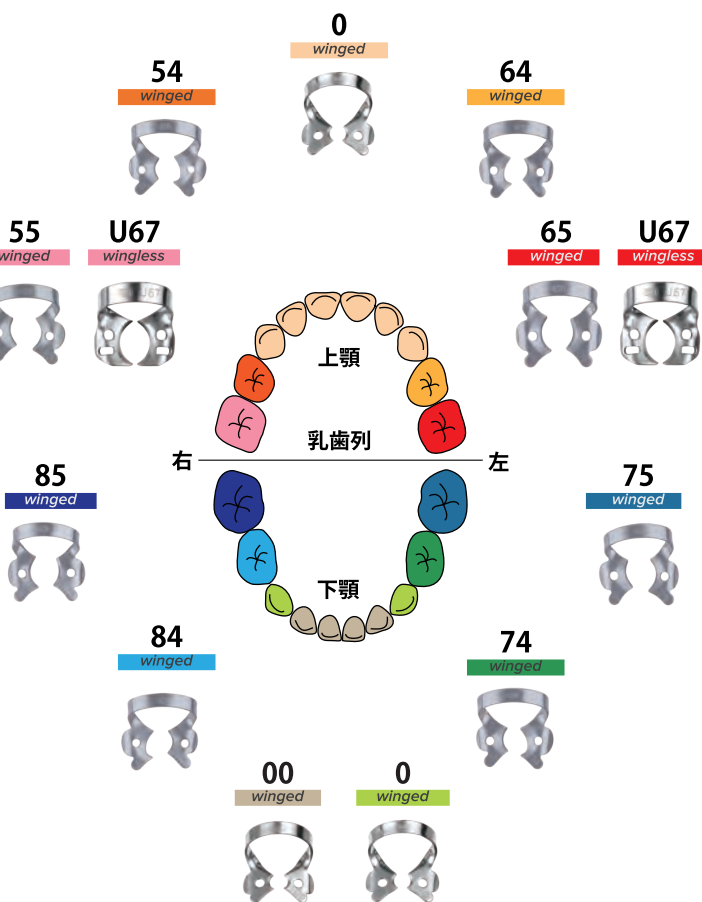

KSKクランプボード



クランプボード#8

ステンレス製
サイズ：90×90mm

クランプ付ボード：#9×2, 2A, W2A, 5, 56, 203, 204

または
クランプボードのみ



クランプボード#12

ステンレス製
サイズ：150×90mm

クランプ付ボード：#210, 9, 0, 2, 2A, 206, 207, 5, 56, 7, 201, 202

または
クランプボードのみ



クランプボード#18

ステンレス製
サイズ：160×120mm

クランプ付ボード：#210, 9, P-1, P-2, 22, 27, 29, 208, 209, 18, 138, 139, 7, 201, 202, 203, 204, 205

または
クランプボードのみ

【販売名/クラス分類/一般的名称/届出番号】
クランプ付ボード/一般区医療機器
歯科用ラバーダムクランプ/1382X00094000081



乳歯用クランプボード マット

ステンレス製
サイズ：90×90mm

#54- 上顎右 D #64- 上顎左 D
#55- 上顎右 E #65- 上顎左 E
#85- 下顎右 E #75- 下顎左 E
#84- 下顎右 D #74- 下顎左 D

または
クランプボードのみ

【販売名/クラス分類/一般的名称/届出番号】
乳歯用クランプボード/一般区医療機器
歯科用ラバーダムクランプ/1382X00094000112

株式会社 **デンテック**

TEL: 03-3964-2011 FAX: 03-3962-5624
Web: www.dentech.co.jp E-mail: info@dentech.co.jp
〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5



How to choose

KSK

Rubber Dam Clamps




76 種 × 3 色



ラバーダムクランプの特長

- デンテックのラバーダムクランプは、特に吟味されたステンレスを使用しています。
- バネ性・耐食性ともに優れています。
- 形態が豊富なため、歯牙に応じたクランプを選択することができます。
- 製造ロット毎に金属疲労テストを行い、合格したものを製品として出荷しております。
- すべてのクランプ曲げを職人がひとつひとつ手作業で調整しており、品質が均一です。
- ピークは全て刃付けされているため、歯牙へのフィット感に優れています。
- ブラックとマットのクランプは、強くまぶしい光による眼精疲労を防ぐための特殊加工を施しています。
- 全てのクランプは日本製です。

ラバーダムコンプリートセット

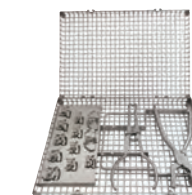

- セット内容:
- ① クランプ付ボード#12
 - ② ヤングフレーム 大
 - ③ ラバーダムパンチ
 - ④ KSKクランプフォーセップス


ラバーダムスターターキット

- セット内容:
- ① クランプ付ボード#12
 - ② ヤングフレーム 大
 - ③ ラバーダムパンチ
 - ④ KSKクランプフォーセップス
 - ⑤ ラバーダムテンプレート
 - ⑥ ノンラテックスデンタルダム (20枚入り)

クランプの種類:
#210, #9, #0, #2, #2A, #206, #207, #5, #56, #7, #201, #202

【販売名/クラス分類/一般的名称/届出番号】
ラバーダムコンプリートセット/一般区医療機器
歯科用ラバーダムコンプリートセット/1382X00094000081

ラバーダムスターターキット/一般区医療機器
歯科用ラバーダムコンプリートセット/1382X00094000171

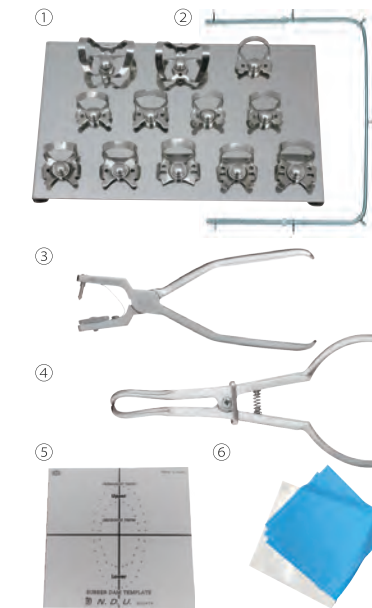

小児用クランプ

テクニクセット

永久歯用クランプ

3色 ノーマル マット ブラック



※Y10、小児用クランプはマットのみ。

42 43

wingless



上顎左右大白歯用クランプです。

4 205 5 8A 201 14 14T 51 26 W8A U67 18

winged



上顎一般用でピークに反りがあり歯頸部によく適合します。 上顎大白歯用でピークに反りがあり維持力が強い。 大きめの上顎大白歯用の一般的なクランプです。 上顎大白歯の歯根用クランプ。歯肉縁下を把持出来る形態となっています。 上顎大白歯用でピークに反りがあり、歯頸部の治療に適しています。 半萌出の掛かりにくい症例に使われ、しっかり把持出来る形態です。 頬舌の両側に歯根分岐部のある場合、歯肉を押し出すことが出来ます。 #201の無翼型。上顎大白歯の歯頸部の露出している歯に使用。第二乳歯にも使用出来ます。 #8Aの無翼型です。 上顎7番に達した上顎前歯犬歯用クランプです。 上下顎大白歯用。ピークの丸みが歯頸部に適合します。

ディスタルクランプ
プラスト

56T 14T 3

51 31 30 25 W8A 18

winged

wingless



最後歯部用のクランプで、乳歯にも使用できません。 ※販売は株式会社歯科工業社。 下顎大白歯用でピークに反りがあり、歯肉縁下の窩洞にも使用されます。 半萌出の掛かりにくい症例に使われ、しっかり把持出来る形態です。 小さめの下顎大白歯用でピークは平らで歯肉に食い込みません。 頬舌の両側に歯根分岐部のある場合、歯肉を押し出すことが出来ます。 下顎の歯肉縁下の左右で頬側ピークの突起部が歯根分岐部に入ります。 左右の頬側の歯肉縁下の窩洞に使用。頬側のピークが深く広がります。 #8Aの無翼型です。 上下顎大白歯用。ピークの丸みが歯頸部に適合します。

1 1T 1A 1AT 22 27 W2A 203 204 202 201

winged

wingless

winged



小臼歯の歯根用です。ピークが深くなっています。 歯根部に深く掛けるタイプです。歯肉縁下の窩洞にも使用されます。 #207の無翼型。平らなピークを持つ一般的な上下顎小臼歯用クランプです。 #206の無翼型で、ピークが反っているため、歯頸部に深く掛けることが出来ます。 #2Aと同じ患歯に使用される無翼型のクランプです。 左右の下顎大白歯用で頬側が大きいです。第一乳歯にも使用出来ます。 大きめの下顎大白歯用で、#200より一回り大きく出来ています。 上顎大白歯用でピークに反りがあり、歯頸部の治療に適しています。

207 208 2A 2AT

winged



一般的な上下顎用の有翼型で、ピークは平らです。#22の翼付きです。 大きめの小臼歯用で、#207と同じタイプですが、フランジがやや大きいです。 大きめの上下顎小臼歯用で、#2の一回り大きいタイプです。

9T 2T 212 22 44

winged

wingless



前歯唇面窩洞に広く用いられます。 下顎の小臼歯用でピークは平らです。 上下顎前歯肉肉圧排用クランプです。 #207の無翼型で、平らなピークを持ち一般的な上下顎小臼歯用クランプです。 平らなピークを持つ上下顎前歯犬歯用クランプです。

9T 210 212 90N

winged

wingless

wingless

wingless



前歯唇面窩洞に広く用いられます。 前歯の唇面用ですが、犬歯や小臼歯の唇面窩洞にも使用できます。 上下顎前歯肉肉圧排用クランプです。 #9の新しい型です。

6 9 44 212SA

winged


wingless

wingless

wingless



唇面用クランプです。 前歯唇面窩洞に広く用いられます。 平らなピークを持つ上下顎前歯犬歯用クランプです。 上下顎前歯の歯肉圧排用クランプ。#212に比べ、歯肉への食い込みが強くなっています。

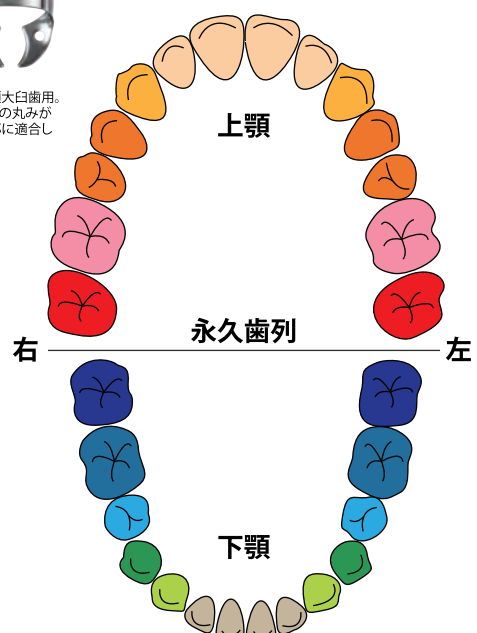

208 207 206 1T 22 27 29 Y10

winged

wingless



大きめの小臼歯用で、#207と同じタイプですが、フランジがやや大きいです。 一般的な上下顎用の有翼型で、ピークは平らです。#22の翼付きです。 上下顎の小臼歯用で、深く掛けるタイプです。#27の翼付きです。 小臼歯の歯根用で、ピークが深くなっています。 #207の無翼型で、平らなピークで、歯頸部に深く掛けることが出来ます。 #206の無翼型で、ピークが反っているため、歯頸部に深く掛けることが出来ます。 上下顎小臼歯用で、ピークは平らで大きく広い視野が得られます。 上下顎に使用できます。歯頸部に食い込ませる形状になっております。

205 5 8A 201 14A 4 8 28 24 42 43

winged

wingless



上顎大白歯用でピークに反りがあり維持力が強い。 大きめの上顎大白歯用の一般的なクランプです。 上顎大白歯の歯根用クランプ。歯肉縁下を把持出来る形態となっています。 上顎大白歯用でピークに反りがあり歯頸部によく適合します。 #14より一回り大きく出来ています。 上顎一般用でピークに反りがあり歯頸部によく適合します。 #7と同じサイズでピークは丸い歯頸部に適合します。 #200の無翼型で、上下顎大白歯用でフランジの巾が広く視野が広がります。 左右の頬側の歯肉縁下の窩洞に使用。頬側のピークが深く広がります。 上顎左右大白歯用クランプです。

202 14 56 7 W3 31 30 28 25 15

winged

wingless



大きめの下顎大白歯用で、#200より一回り大きく出来ています。 半萌出の掛かりにくい症例に使われ、しっかり把持出来る形態です。 下顎大白歯用で、#7に比べてピークの反りがやや強くなっています。 下顎大白歯用で平らなピークを持ち、決して歯肉に食い込みません。 小さめの下顎大白歯用で、ピークは平らで歯肉に食い込みません。 #3の無翼型です。 下顎の歯肉縁下の左右で頬側ピークの突起部が歯根分岐部に入ります。 #200の無翼型で、上下顎大白歯用でフランジの巾が広く視野が広がります。 左右の頬側の歯肉縁下の窩洞に使用。頬側のピークが深く広がります。 大きめの下顎大白歯用。ピークが大きく巾も広い。スプリングも強く出来ます。

7A 14A 56A 14T 56T 2T 2A 2AT 1 1T 1A 1AT

winged

winged



大きい下顎大白歯用です。 #14より一回り大きく出来ています。 #56より一回り大きく出来ています。 半萌出の掛かりにくい症例に使われ、しっかり把持出来る形態です。 下顎大白歯用でピークに反りがあり、歯肉縁下の窩洞にも使用されます。 下顎の小臼歯用でピークは平らです。 大きめの上下顎小臼歯用で、#2の一回り大きいタイプです。 小臼歯の歯根用です。ピークが深くなっています。 歯根部に深く掛けるタイプです。歯肉縁下の窩洞にも使用されます。

29 22 27 W2A Y10 207 209 0 00

wingless

winged



上下顎小臼歯用で、ピークは平らで大きく広い視野が得られます。 #207の無翼型で、平らなピークを持ち一般的な上下顎小臼歯用クランプです。 #206の無翼型で、ピークが反っているため、歯頸部に深く掛けることが出来ます。 #2Aと同じ患歯に使用される無翼型のクランプです。 上下顎に使用できます。歯頸部に食い込ませる形状になっております。 一般的な上下顎用の有翼型で、ピークは平らです。#22の翼付きです。 下顎小臼歯用で、#208よりやや小さく、スプリングが硬くなっています。 狭い歯頸部の小臼歯に使用され、小児の前歯にも使用できます。 極めて小型の歯に適します。小児の前歯にも使用できます。

【販売名】クラス分/種/一般的名称/届出番号
 クラス分/種/一般的名称/届出番号
 ディスタルクランプ/プラスト/1382X0094000008
 ディスタルクランプ/プラスト/1382X00940000125